
BEISPIEL-LAYOUT

HAUPTMENÜ 1. Insulindosis berechnen 2. Therapie Parameter 3. Bltuzuckertagebuch

Abb.1: Hauptmenü

THERAPIE PARAMETER
Bolusinsulin:(dropdown-Liste)
Normbereich Min: Max:
KE-Faktor IE/KE
Korrektur Ab welchem BZ-Wert? In welchen Schritten? Wie viele IE zusätzlich?
SPEICHERN

<u>Abb.2:</u> Menü-Option 2. Folgende Variablen werden gespeichert (von oben nach unten): *insulin*, *normmin*, *normmax*, *kefaktor*, *korrBZ*, *korrSchritte*, *korrIE*

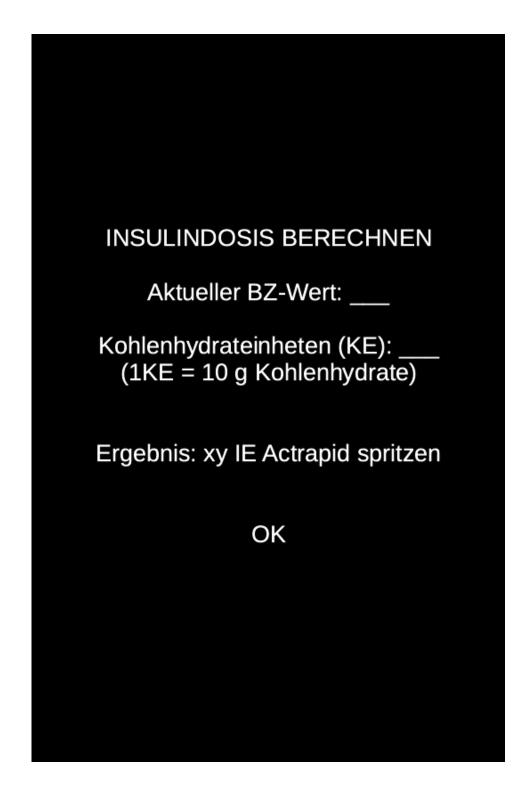

PSEUDOCODE / BERECHNUNG

```
// Der BZ-Wert vor dem Essen ist zu niedrig
IF bz < normmin THEN
System.out.println("Unterzuckerung! Kein" + insulin + "spritzen! Traubenzucker!");
// Der BZ-Wert vor dem Essen ist extrem hoch (definiert als > 280 mg/dl)
IF bz > 280 THEN
System.out.println("Blutzucker sehr hoch! Bitte Arzt anrufen!");
// Der BZ-Wert vor dem Essen ist normal: man spritz die Standarddosis
IF bz > normmin AND bz < normmax {
int standarddosis = ke * kefaktor // Standarddosis, s. Wikipedia-Artikel "BE-Faktor"
System.out.println("Ergebnis: " + dosis + "IE" + insulin + "spritzen");
// Der BZ-Wert vor dem Essen ist hoch: man spritz die Standarddosis plus "Korrekturdosis"
IF bz > normmax AND bz < 280 {
int standarddosis = ke * kefaktor
int diskrepanz = bz – normmax
float stufefloat = diskrepanz / korrschritte
int stufeint = Math.ceil(stufefloat)
int dosis = standarddosis + (stufeint * korrIE)
System.out.println("Ergebnis: " + dosis + "IE" + insulin + "spritzen");
```